

# Dräger DrugTest® 5000

## Sistema de análisis para la detección de drogas

Ningún pipeteo, goteo o cronometraje:  
con el Dräger DrugTest® 5000 la toma de muestras no sólo se realiza rápida y sencillamente, sino que también podrá analizarla de inmediato de manera completamente automática y obtener un resultado fiable directamente en el lugar del muestreo.



### TOMA DE MUESTRAS Y ANÁLISIS EN UN SOLO SISTEMA

El sistema de análisis de drogas Dräger DrugTest 5000 está compuesto por el kit de prueba Dräger DrugTest 5000, que es un sistema de toma de muestras, y el analizador Dräger DrugTest 5000 Analyzer. Con este sistema usted tiene todo a mano cuando necesite una primera certeza en el mismo lugar de la toma de muestras.

### KIT DE PRUEBA DRÄGER DRUGTEST® 5000: TOMA RÁPIDA Y SENCILLA DE MUESTRAS DE SALIVA

#### Siempre disponible en caso de necesidad

Con el kit de prueba usted dispone de un sistema de colección listo para utilizar. ¿Desea controlar a una persona sospechosa? Simplemente retire la caperuza protectora y dele el casete de prueba a la persona de experimentación.

#### Higiénico e indoloro: toma de muestras sin extracción de sangre

La persona introduce el bastoncillo en su boca y lo mueve entre el carrillo y la encía durante uno a cuatro minutos. Luego la persona le devuelve el casete de prueba sin que usted tenga contacto con la muestra de saliva.

### Azul significa: la toma de muestras ha finalizado

La finalización de la toma de muestras es indicada automáticamente: en cuanto el bastoncillo haya absorbido suficiente saliva, el indicador integrado se volverá azul. A continuación usted introduce el casete de prueba y el cartucho directamente en el Dräger DrugTest 5000 Analyzer para su posterior análisis.

### OTRAS VENTAJAS DEL

#### KIT DE PRUEBA DRÄGER DRUGTEST® 5000:

- Fácil de utilizar – con o sin guantes
- Apropiado tanto para zurdos como para diestros
- Límite de detección extremadamente bajo para THC como principal ingrediente activo del cannabis
- Diferentes configuraciones disponibles (según la versión es posible detectar varias sustancias a la vez)
- Almacenable en el embalaje original hasta una temperatura de 30 °C
- Utilización posible a temperaturas entre 4 °C y 40 °C



ST-132/14-2007

Dräger DrugTest 5000 – tomar una muestra y analizarla de inmediato



D-317/4-2011

Kit de prueba Dräger DrugTest® 5000: fácil de usar, rápido, fiable y seguro en la detección de drogas.

## DRÄGER DRUGTEST® 5000 ANALYZER



**Asa de transporte muy práctica**  
fácil de transportar con una sola mano – incluso sin maletín

**Pantalla en color de fácil lectura**

**Manejo sencillo mediante tres teclas**

**Carcasa robusta**

**Abertura grande**  
fácil introducción del casete y el cartucho

### DRÄGER DRUGTEST® 5000 ANALYZER: ANÁLISIS AUTOMÁTICO INMEDIATO DE LAS MUESTRAS

#### **Introducir el casete y el cartucho, iniciar el proceso, listo**

La muestra de saliva se puede analizar inmediatamente después de tomar la muestra. Simplemente tiene que introducir el casete de prueba y el cartucho en el analizador y el análisis empezará automáticamente.

#### **Fácil y seguro de manejar – incluso bajo condiciones desfavorables**

En caso de que la situación sea estresante: con tan sólo tres teclas usted tiene el analizador completamente bajo control. El manejo es guiado por menú. Simplemente siga las instrucciones de texto claro.

#### **Rápido y cómodo: resultados disponibles en pocos minutos**

Una vez puesto en marcha el aparato, el análisis se realiza de manera completamente automática. Así usted tiene tiempo para preocuparse, por ejemplo, de la persona de experimentación. El resultado le será indicado automáticamente en breves minutos.

#### **Pantalla en color de fácil lectura**

La pantalla en color está iluminada. De esta manera usted siempre estará al tanto incluso en caso de malas condiciones de visibilidad. El texto que aparece en la pantalla también se deja ver sin ningún problema desde una cierta distancia o desde un ángulo visual oblicuo.

#### **Resultados de medición claros sin margen para interpretaciones**

También el resultado de medición aparece en frases completas. Así, eventuales interpretaciones erróneas quedan prácticamente excluidas.



D-2087-2011

Dräger Drugtest 5000 y accesorios en el maletín de transporte



ST-8404-2006

Dräger Mobile Printer



ST-3481-2003

Teclado compacto



ST-13211-2007

Caja de transporte

### Analizar muestras siempre que sea necesario

El analizador funciona con baterías recargables que están incorporadas fijamente en el aparato. Así usted no depende de una alimentación eléctrica externa y puede iniciar el análisis de inmediato en cualquier lugar.

### Almacenar 500 resultados de medición y gestionarlos con facilidad

El analizador está equipado con una memoria. Ésta almacena los últimos 500 resultados de medición incluyendo fecha y hora. Usted puede introducir más detalles referentes a la medición a través de un teclado o un lector de código de barras. Los resultados se dejan imprimir directamente en el lugar del análisis por medio

de la Dräger Mobile Printer. Para documentar los datos, puede transferirlos a un ordenador vía interfaz USB.

### Fácil de transportar – sólo pesa 4,5 kg

El analizador es un verdadero peso ligero. Puede transportarlo con suma facilidad. Para poder transportar el aparato junto con los accesorios de manera cómoda y segura, Dräger le ofrece opcionalmente un maletín de transporte apropiado o una caja de transporte robusta.

### OTRAS VENTAJAS DEL DRÄGER DRUGTEST® 5000 ANALYZER:

– Función de autocomprobación integrada: una calibración semestral no es necesaria


– Gran cantidad de accesorios (p. ej., maletín, fuente de alimentación o teclado compacto)

### LOS SIGUIENTES ESTUPEFACIENTES Y MEDICAMENTOS, POR EJEMPLO, SE PUEDEN DETECTAR CON EL DRÄGER DRUGTEST® 5000:

- Anfetamina
- Benzodiacepina
- Delta-9-tetrahidrocanabinol- Cannabis
- Cocaína
- Metanfetamina
- Opiáceos
- Metadona


## DRÄGER DRUGTEST® 5000

ST-319-2008

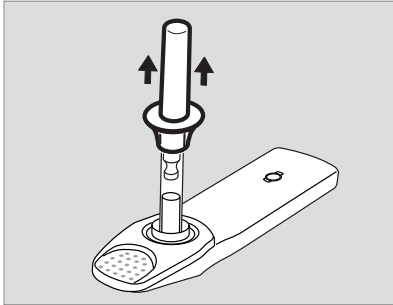


- Retirar la caperuza protectora.
- Darle a la persona de experimentación el casete de prueba.

D-4780-2011

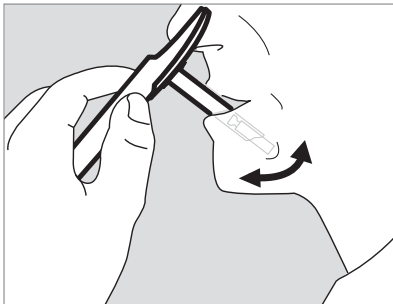

- La persona de experimentación debe mover el bastoncillo en el interior de su boca hasta que el indicador se vuelva de color azul.

D-4779-2011

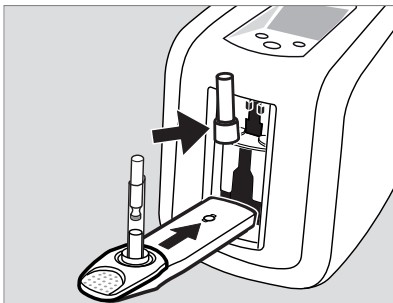

- Introducir el casete de prueba y el cartucho en el analizador. El análisis se inicia automáticamente.
- Después de unos pocos minutos el resultado aparece en la pantalla.

## KITS DE PRUEBA DRÄGER DRUGTEST® 5000



**Dräger SSK 5000:**  
**Detección de drogas sobre superficies o en sustancias**

¿Desea analizar in situ una muestra tomada, por ejemplo, de un volante o un billete de dinero? Tome la muestra con el colector de muestras Dräger SSK 5000 y simplemente transfírala al bastoncillo del kit de prueba Dräger DrugTest 5000. Así usted puede dejar que el Dräger DrugTest 5000 Analyzer analice la muestra.

## DATOS TÉCNICOS

Tensión de servicio	12 V CC (vía fuente de alimentación suministrada)
Consumo de corriente	normalmente 3 A
Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	200 x 260 x 250 mm
Peso	4,5 kg
Condiciones ambientales	Funcionamiento: de 4 °C a 40 °C Almacenamiento/transporte: de -20 °C a +60 °C Humedad relativa del 5 al 95 % (sin condensación)
Interfaces	óptica para la impresora, PS/2, USB esclavo
Duración de una medición	depende del kit de prueba utilizado (típico < 9 minutos)
Capacidad de memoria	500 registros o mediciones

## INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

	Unidad de embalaje	N.º de pedido
Dräger DrugTest 5000 Analyzer	1 analizador incl. fuente de alimentación	83 19 900
Kit de prueba Dräger DrugTest 5000 COC-OPI-BENZO-THC-AMP-MAMP*	20 unidades	83 19 830
Kit de prueba Dräger DrugTest 5000 COC-OPI-BENZO-THC-AMP-MTD*	20 unidades	83 20 930
Kit de prueba Dräger DrugTest 5000 COC-OPI-THC-AMP-MAMP*	20 unidades	83 21 280
Kit de prueba Dräger DrugTest 5000 COC-OPI*	20 unidades	83 19 990
Kit de prueba Dräger DrugTest 5000 COC-OPI-BENZO-THC-AMP-MAMP-MTD*	20 unidades	83 22 388
Dräger SSK 5000	20 unidades	83 20 490
Teclado compacto, asignación de teclas alemana („QWERTZ“)	1	83 15 095
Teclado compacto, asignación de teclas inglesa („QWERTY“)	1	83 15 497
Teclado compacto, asignación de teclas francesa („AZERTY“)	1	83 15 142
Lector de código de barras	1	AG 02 491
Dräger Mobile Printer	1	83 19 310
Maletín de transporte para DrugTest 5000 Analyzer	1	83 19 960
Maletín de servicio de urgencia para DrugTest 5000 Analyzer y accesorios	1	83 22 675
Caja de transporte para DrugTest 5000 Analyzer	1	83 19 925
Cable de 12 V para conexión al enchufe de abordo de 12 V	1	83 12 166

\*COC: Cocaína – \*OPI: Opiáceos – \*BENZO: Benzodicepina – \*THC: Cannabis – \*AMP: Anfetamina – \*MAMP: Metanfetamina – \*MTD: Metadona

### SEDE PRINCIPAL

Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Revalstrasse 1  
23560 Lübeck, Alemania  
  
www.draeger.com

### SUBSIDIARIAS

#### BRASIL

Dräger Indústria e Comércio Ltda.  
Al. Pucuruí, 51 – Tamboré  
06460-100 – Barueri – SP  
Tel +55 11 46 89 49 44  
Fax +55 11 41 91 35 08

#### CANADA

Draeger Safety Canada Ltd.  
7555 Danbro Crescent  
Mississauga, Ontario L5N 6P9  
Tel +1 905 821 8988  
Fax +1 905 821 2565

### ESPAÑA

Dräger Safety Hispania, S.A.  
Calle Xaudaró 5  
28034 Madrid  
Tel +34 913 580-244  
Fax +34 917 294-899

### MÉXICO

Draeger Safety S.A. de C.V.  
Av. Peñuelas No. 5  
Bodega No. 37  
Fraccionamiento Industrial  
San Pedrito  
Querétaro, Qro México  
Tel +52 442 246-1113  
Fax +52 442 246-1114

### SUDAMÉRICA (MENOS BRASIL)

Dräger Safety Hispania, S.A.  
Calle Xaudaró 5  
28034 Madrid, España  
Tel +34 917 283-444  
Fax +34 917 283-744

### USA

Draeger Safety, Inc.  
101 Technology Drive  
Pittsburgh, PA 15275  
Tel +1 412 787 8383  
Fax +1 412 787 2207